



# CSC-KOL ROVNÝ INTRALUMINÁLNÍ STAPLER


STAPLER PRO JEDNORÁZOVÉ VNITŘNÍ POUŽITÍ

# KOL™ – STAPLER URČENÝ K TME

## STAPLER PRO JEDNORÁZOVÉ VNITŘNÍ POUŽITÍ

### VLASTNOSTI VÝROBKU

- Automatická bezpečnostní pojistka (ASL™) zabraňuje nechtěnému odpálení
- SMT™ přesně zpracované hroty svorek umožňující správné sešití tkáně
- Mezinárodně patentováno
- Nová povrchová úprava umožňující lepší manipulaci a ovládání zařízení
- Individuální sériové číslo pro jednoznačnou identifikaci zařízení

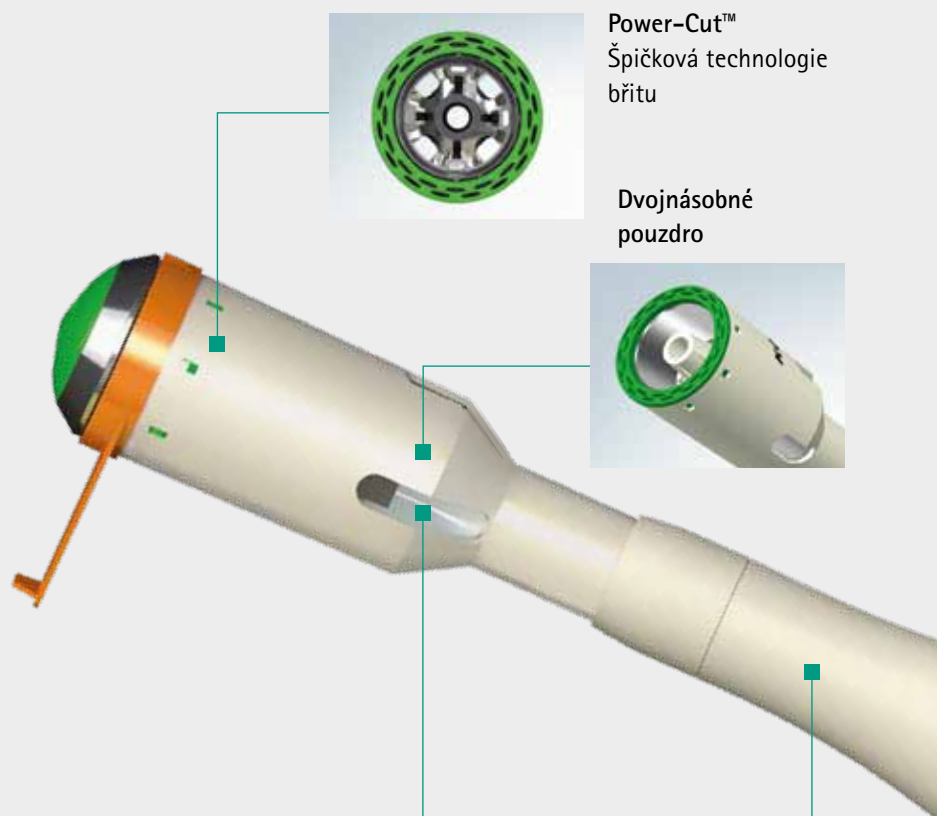


Power-Cut™  
Špičková technologie  
bříty


Dvojnásobné  
pouzdro

4 trakční otvory  
pro „end to end“ anastomózu  
(odstranění „dog ears“)


Just-Fit™ a Uni-link™  
technologie pro zlepšení  
přenosu přímé síly odpálení  
a umožňující paralelní  
tkáňovou kompresi  
a kompletní formaci svorek

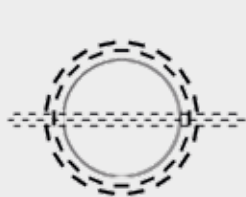

Technika dvou linií svorek

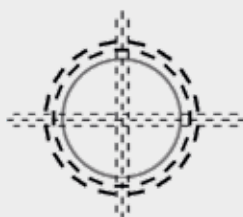

Technika tří linií svorek

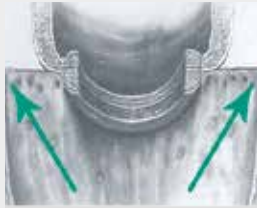

S "dog ears"




Bez "dog ears"



# KOL™ – stapler určený k TME

## INTRALUMINÁLNÍ STAPLER PRO JEDNORÁZOVÉ VNITŘNÍ POUŽITÍ

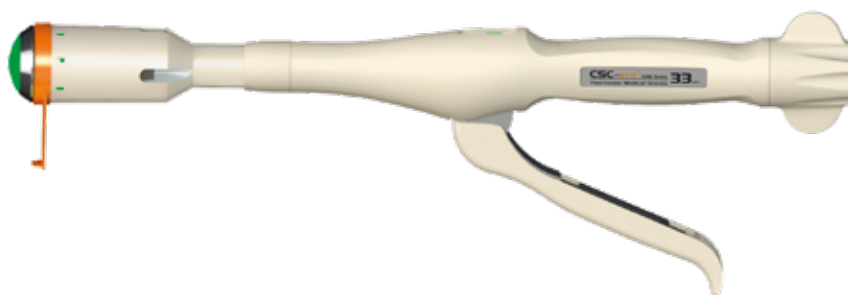

Katalog. číslo	Průměr kloboučku	Barva kloboučku	Počet svorek	Průměr čepele	Výška svorky	Výška zavřené svorky	Délka / Objem pouzdra
CSC29-KOL	29 mm	Modrá	24	20,5 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 12,1 cm
CSC33-KOL	33 mm	Zelená	32	24,8 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 17,8 cm

Vyrábí:



Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 21 A Science Plaza  
International Science Park | No. 1355 Jinjihu Avenue | Suzhou | China

Distribuce:

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.com | www.bbraun.cz