


LC – Lineárny kater a zásobníky

Jednorazový stapler na vnútorné použitie

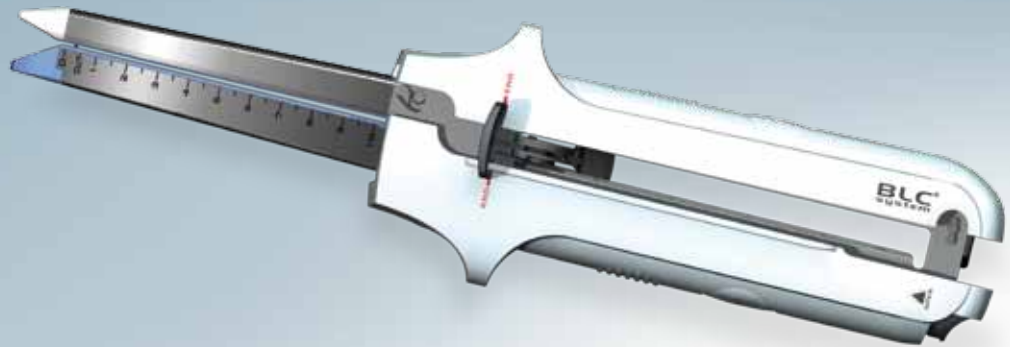

LC – Lineárny kater a zásobníky

Jednorazový stapler na vnútorné použitie

Charakteristika

BLC™ - Vyvážený pákový systém ovládania.

Zabezpečuje paralelné uzavretie vidlic nástroja.

- Čap na správne umiestnenie tkaniva
- Dve polohovacie miesta
- Zosilnená oceľ

TPC™ - Vrúbkovanie na správne umiestnenie tkaniva.


Zabraňuje skĺznutiu tkaniva medzi vidlicami nástroja.

SLR™ - Bezpečná vzdialenosť okraja a ostria.


Zvyšuje bezpečnosť línie svoriek.

Vlastnosti


- Nový nôž s každým odpalom.
- Obojstranná odpaľovacia páka.
- Tlačidlo na rýchle uvoľnenie.
- Indikátor konca línie.
- Závesné spojenie.
- Plávajúci zásobník.
- Tvarovaná protišmyková rukoväť.
- Doplnková veľkosť svoriek zlatého zásobníka.
- Ukazovateľ dĺžky na oboch stranách vidlice so zásobníkom.
- Systém Štart a stop v dĺžke o 1,5 svorky presahujúcej líniu rezu.
- Možnosť 11 výmen zásobníka s maximálnym počtom 12 odpalov.

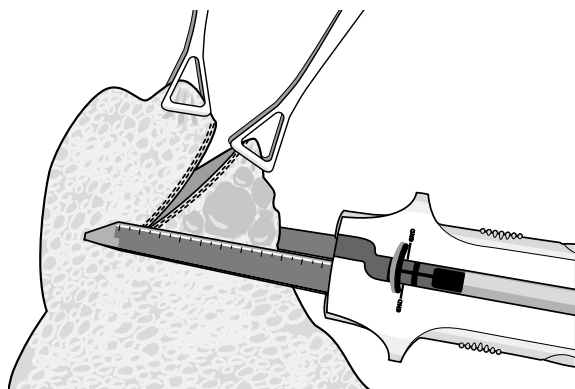

Opis

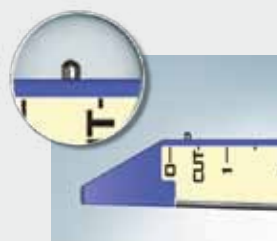

Čap na správne umiestnenie tkaniva

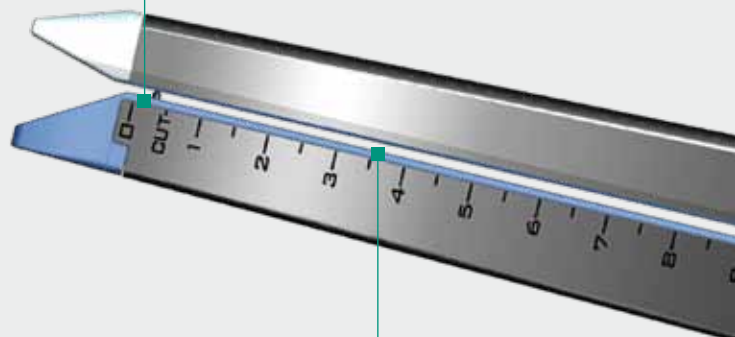


Vrúbkovanie na fixáciu tkaniva


Chránené ostrie



Pred odpalom

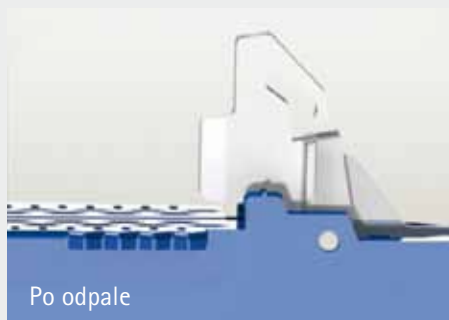


Po odpale

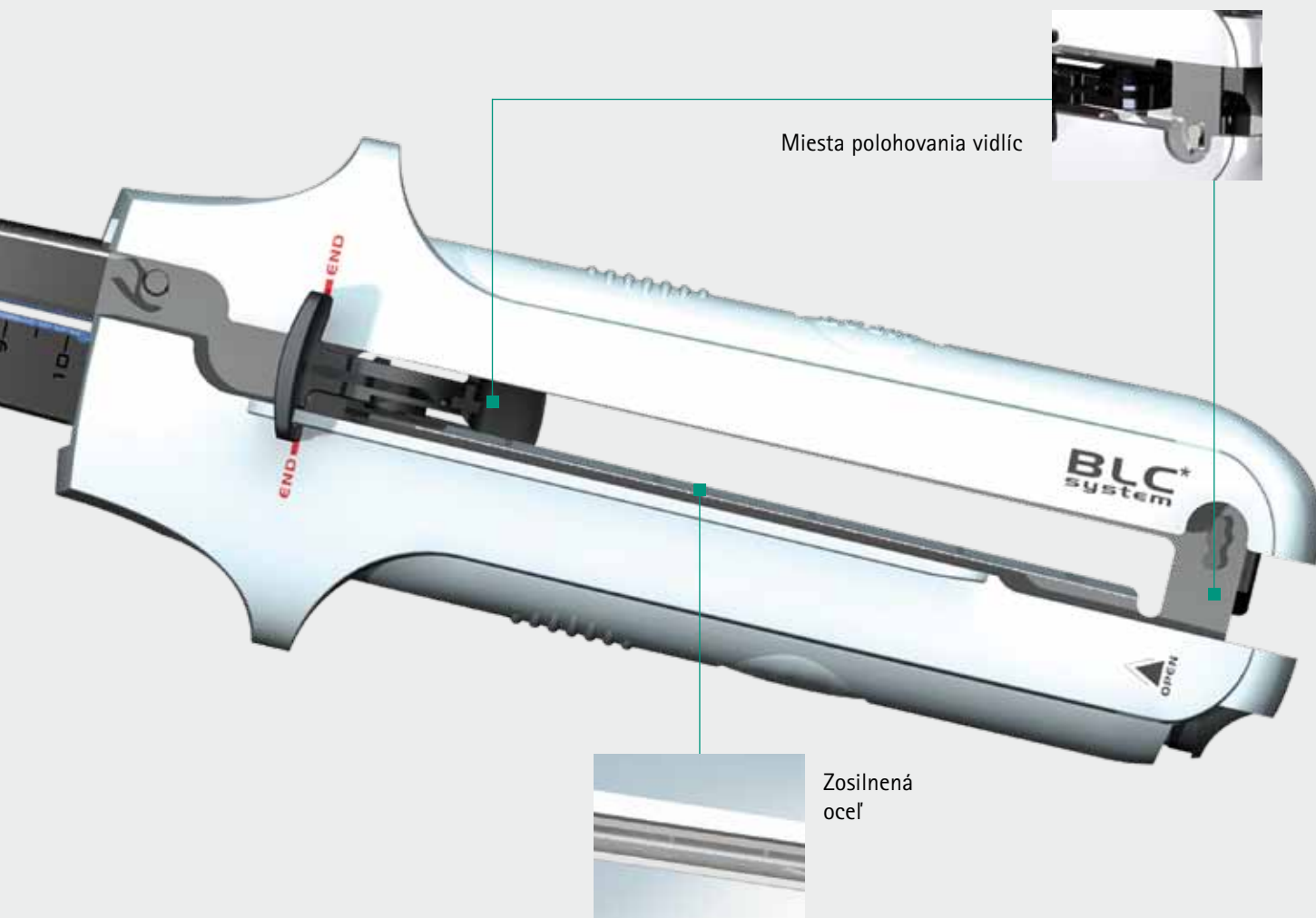

Informácie na objednanie

Katalógové číslo	Produkt	Dĺžka línie svoriek	Dĺžka rezu	Počet svoriek	Výška svorky	Farba
LC6038	Kater	60	54	64	3,8	Modrá
LCC6038	Zásobník	60	54	64	3,8	Modrá
LC6045	Kater	60	54	64	4,5	Zelená
LCC6045	Zásobník	60	54	64	4,5	Zelená
LC8038	Kater	80	74	84	3,8	Modrá
LCC8038	Zásobník	80	74	84	3,8	Modrá
LC8042	Kater	80	74	84	4,2	Zlatá
LCC8042	Zásobník	80	74	84	4,2	Zlatá
LC8045	Kater	80	74	84	4,5	Zelená
LCC8045	Zásobník	80	74	84	4,5	Zelená
LC10038	Kater	100	94	104	3,8	Modrá
LCC10038	Zásobník	100	94	104	3,8	Modrá

Vyrába:

 Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 21 A Science Plaza
International Science Park | No. 1355 Jinjihu Avenue | Suzhou | China

Distribúcia:

B. Braun Medical s.r.o. | Divízia Aesculap | Hlučínska 3 | SK-831 03 Bratislava
Tel. +421-2-638 38 920 | Fax +421-2-446 38 067 | www.bbraun.sk
Bezplatné linky pre SR: Tel. 0800 155 440 | Fax 0800 155 441

Všetky práva sú vyhradené. Technické zmeny sú možné. Tento informačný materiál sa nesmie používať na iné účely, než je ponuka, nákup a predaj našich výrobkov. Žiadna jeho časť sa nesmie kopírovať alebo inak reprodukovat'. V prípade zneužitia si vyhradujeme právo naše katalógy a cenníky odobrať a podniknúť príslušné právne kroky.